

SUTUMED

A legacy of quality in surgery.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**Sutumed Headquarters &
Corporate Office USA** 

📍 6237 Presidential Court Suite 140, Fort Myers, FL 33919

☎ (239) 590-8484

✉ info@sutumed.us

🌐 www.sutumed.us



Índice

Sobre nosotros	. 3
Nuestros valores	. 4
Presencia global	. 5
Nuestra meta	. 6
Nuestras agujas	. 7
Etiqueta primaria	. 8
Cuadro de agujas	. 9
Suturas Absorbibles	. 10
Suturas No absorbibles	. 23
Mallas Qurúrgicas	. 34
Esponja Hemostática	. 39
Cera para Huesos	. 41



Sobre Nosotros

Somos una empresa Norteamericana comprometida a brindar soluciones quirúrgicas para profesionales de la salud.

Nos centramos en comprender las necesidades de nuestros clientes con productos de calidad y rentables que ayudan a mejorar la vida y la curación de los pacientes.

Nuestros Valores



Compromiso

Por nuestro compromiso de ofrecer productos de calidad y rentables



Pasión

Por la pasión que ponemos en el desarrollo de nuestros productos



Enfoque

Por el enfoque que ponemos en comprender las necesidades de nuestros clientes



Presencia Global

Con más de 70 socios en más
de 40 países.



Nuestra Meta

Proporcionar las mejores soluciones quirúrgicas.


Garantía de Calidad

- ✓ Personal formado y cualificado.
- ✓ Estrictos controles en: producción, etiquetado, envasado, inspección, almacenamiento y distribución de productos.


Certificaciones

- ✓ Instalación de fabricación de clase 100.000.
- ✓ Certificación de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).
- ✓ Gestión de la calidad: ISO 9001.
- ✓ Gestión de la calidad de dispositivos médicos: ISO 13485.
- ✓ Certificación - Salud y seguridad en el trabajo: ISO 45001.
- ✓ Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP).
- ✓ Cámara de Comercio de EE.UU.

Anatomía de la aguja

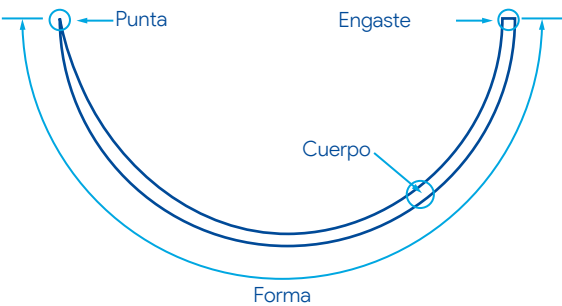

Curvatura de la aguja

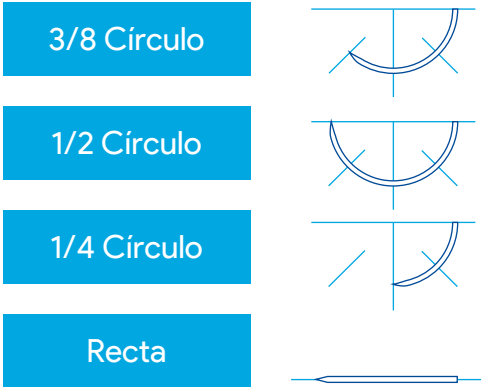


Formas de Aguja

Tipo	Punta	Forma	Dibujo
Reverso Cortante (A) (B)			
Cortante Convencional (A) (B)			
Punta Redonda (A) (B)			
Punta Cortante (B)			
Aguja de Precisión (D) (F)			
Aguja de Precisión cortante convencional (D)			
Punta Espatulada (C)			
Punta Espatulada Convencional (C)			
Punta Roma (A)			
Recta Cortante (A)			

(A) Cirugía General (B) Cirugía Cardiovascular (C) Cirugía Oftálmica (*) (D) Microcirugía(*) (E) Dental (*)
(F) Cirugía Plástica (*) (*) Una aguja o doble aguja

Etiqueta Primaria

- 1- Medida USP
- 2- Longitud de hebra
- 3- Tipo de aguja
- 4- Longitud de aguja
- 5- Código Data Matrix
- 6- Lote, fabricación, fecha de expira
- 7- Absorbible / no absorbibles
- 8- Esterilización
- 9- Material de sutura
- 10- Nombre de producto
- 11- Código de aguja
- 12- SKU

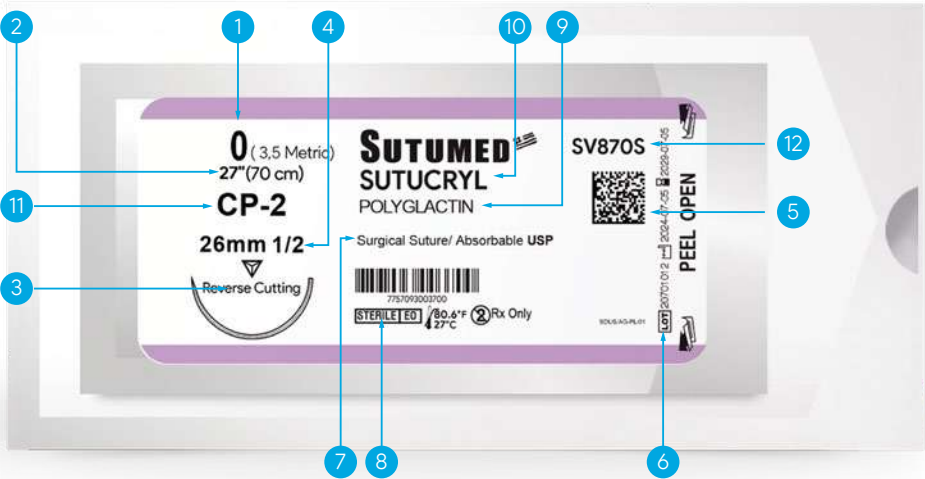


Medida de Hebra

	Cirugía Dental			Cirugía Cardiovascular					Microcirugía			
				Cirugía Dental			Cirugía Oftálmica					
USP	2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	7-0	8-0	9-0	10-0
Métrico	5	4	3.5	3	2	1.5	1	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2

Longitud de Hebra Longitud de Aguja

Pulgadas	Centímetros
6"	15 cm
12"	30 cm
18"	45 cm
20"	50 cm
28"	70 cm
30"	75 cm
35"	90 cm
47"	120 cm
60"	150 cm
141"	360 cm

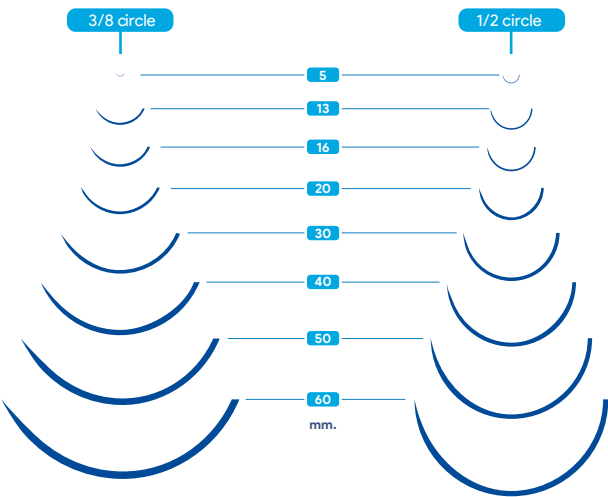

*Para más medidas, revisar las páginas 9 y10.

| Cuadro de Agujas

| Agujas Punta Redonda



3/8 Círculo

BV100-4	5 mm
BV130-4	5 mm
BV130-5	6 mm
BV-1	9.3 mm
BV175-8	10 mm
BV	11 mm
C-1	13 mm
BB	17 mm
BB-1	22 mm

1/2 Círculo

RB-2	13 mm
RB-1	17 mm
SH-2	20 mm
SH-1	22 mm
SH	26 mm
MH-1	30 mm
MO-5	30 mm
CT-1	36 mm
CT	40 mm
LH	40 mm
MO-2	40 mm
CTX	48 mm

| Agujas Espátulada



1/4 Círculo

S-14	8 mm
------	------

Recta

STC - 6	16 mm
---------	-------

| Aguja Recta Cortante



Recta

KS	60 mm
----	-------

| Agujas Reverso Cortante



3/8 Círculo

C-3	13 mm
FS-2	19 mm
FS-1	24 mm
FS	26 mm
FSL	30 mm
FSLX	36 mm

1/2 Círculo

CP-2	26 mm
CP-1	36 mm
CP	40 mm
CPX	48 mm
CPXX	55 mm

| Agujas Punta Cortante



3/8 Círculo

CC	9.3 mm
CC-1	13 mm
V-4	17 mm

1/2 Círculo

V-5	17 mm
V-6	22 mm
V-7	26 mm
V-34	36 mm
V-37	40 mm
V-40	48 mm



Suturas Absorbibles

I Suturas Absorbibles Sintéticas

Producto	Medida USP	Punta de Aguja	Medida de Aguja	Medida de Hebra	Cantidad por Caja
SUTUSORB Ácido Poliglicólico	7/0 a 4	Reverso cortante Redonda Espatulada	10 a 70 mm	70 - 90 cm	12 /36
SUTUCRYL Poliglactín	8/0 a 5	Reverso cortante Redonda Espatulada	6 a 50 mm		
PDO II Polidioxanona	6/0 a 2	Reverso cortante Redonda	11 a 40 mm		
SUTUCRYL MONO Poliglecaxprone	6/0 a 1	Reverso cortante Redonda Espatulada	11 a 37 mm		

I Suturas Absorbibles Naturales

Producto	Medida USP	Punta de Aguja	Medida de Aguja	Medida de Hebra	Cantidad por Caja
CATGUT CRÓMICO	6/0 a 3	Reverso cortante Redonda Cortante	11 a 45 mm	70 - 90 cm	12 /36
SUTUGEN Gutflex	3/0 a 1	Reverso cortante Redonda	19 a 36 mm		
CATGUT SIMPLE	4/0 a 3	Reverso cortante Redonda Reverso cortante convencional	17 a 36 mm		

SUTUSORB

Ácido Poliglicólico

Las suturas de ácido poliglicólico (PGA) son suturas quirúrgicas sintéticas absorbibles fabricadas a partir de un polímero de Poly(glycolido-co-L-lactido) [Glaconer 37] y estearato de Calcio. Son especialmente útiles en procedimientos como la aproximación y ligadura general de tejidos blandos. No se recomienda su uso en zonas del cuerpo donde la sutura pueda estar expuesta a altos niveles de tensión o donde se requiera una sutura de larga duración.



Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 90 días




Composición
Poly(glycolido-co-L-lactido)
[Glaconer 37] y estearato de Calcio.



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona una excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

Otras Características

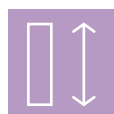

Medida USP
6/0 a 2 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía General
- ✓ Cirugía Plástica
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía Oftálmica



SUTUSORB /Antibacterial Ácido Poliglicólico

Las suturas de ácido poliglicólico (PGA) son suturas quirúrgicas sintéticas absorbibles fabricadas a partir de un polímero de Poly(glycolido-co-L-lactido) [Glaconer 37] y estearato de Calcio recubierto con Triclosán. Son especialmente útiles en procedimientos como la aproximación y ligadura general de tejidos blandos. No se recomienda su uso en zonas del cuerpo donde la sutura pueda estar expuesta a altos niveles de tensión o donde se requiera una sutura de larga duración.



Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 90 días




Composición
Poly(glycolido-co-L-lactido)
[Glaconer 37] y estearato de Calcio, recubierto con Triclosán.



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona una excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

Otras Características

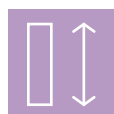

Medida USP
6/0 a 2 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía General
- ✓ Cirugía Plástica
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía Oftálmica



SUTUCRYL

Poliglactín

Las suturas de poliglactina están fabricadas a partir de un polímero de (glicolida-co-L-lactida) [Glaconer 91] y recubierta con Poly(glicolida-co-L-lactida) [Glaconer 37] y estearato de Calcio, que son biodegradables y bioabsorbibles. Tienen una estructura trenzada o retorcida, que proporciona buenas características de manipulación y seguridad del nudo. Por lo general, son fáciles de manipular y tienen una buena seguridad de nudo, lo que las convierte en una elección popular entre los cirujanos.



Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 60 a 80 días




Composición
Poly(glicolida-co-L-lactida)
[Glaconer 37] y estearato de Calcio.



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona una excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

Otras Características

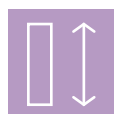

Medida USP
6/0 a 2 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía General
- ✓ Cirugía Plástica
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía Oftálmica



SUTUCRYL/Antibacterial Poliglactín

Polyglactin sutures are manufactured from a poly(glycolide-co-L-lactide) polymer [Glaconer 91] and coated with poly(glycolide-co-L-lactide) [Glaconer 37] and calcium stearate with antibacterial coating of triclosan, which are biodegradable and bioabsorbable. It's a braided or twisted structure that provides good handling characteristics and knot security making them a popular choice among surgeons.



Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 60 a 80 días




Composición
Poly(glycolide-co-L-lactide)
[Glaconer 37] y estearato de
Calcio, recubierto con Triclosán.



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona
una excelente visibilidad en el
campo quirúrgico.

Otras Características

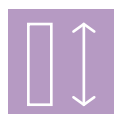

Medida USP
6/0 a 2 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados


- ✓ Cirugía General
- ✓ Cirugía Plástica
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía Oftálmica



PDO II

Polidioxanona


Las suturas Polidioxanona están hechas de un polímero sintético llamado polidioxanona, que es biocompatible y biodegradable. Este material de sutura es resistente y flexible, con buenas características de manipulación. Son especialmente útiles en zonas donde hay tensión en el lugar de cierre de la herida y se utilizan habitualmente para el cierre de heridas en diversos procedimientos quirúrgicos, incluida la cirugía general.

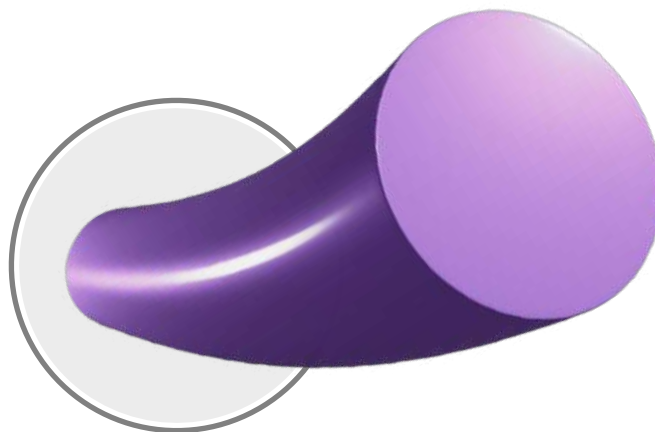

Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 180 a 220 días

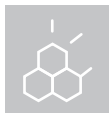

Composición
Poli (p-dioxanona)



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona una excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

Otras Características



Medida USP
5/0 a 1 USP



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular


Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía General
- ✓ Cirugía Plástica
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía Oftálmica



PDO II/Antibacterial Polidioxanona


Sutura absorbible monofilamento hecha de un polímero sintético llamado polidioxanona recubierto con Triclosán, que es biocompatible y biodegradable. Este material de sutura es resistente y flexible, con buenas características de manipulación. Son especialmente útiles en zonas donde hay tensión en el lugar de cierre de la herida y se utilizan habitualmente para el cierre de heridas en diversos procedimientos quirúrgicos, incluida la cirugía general.

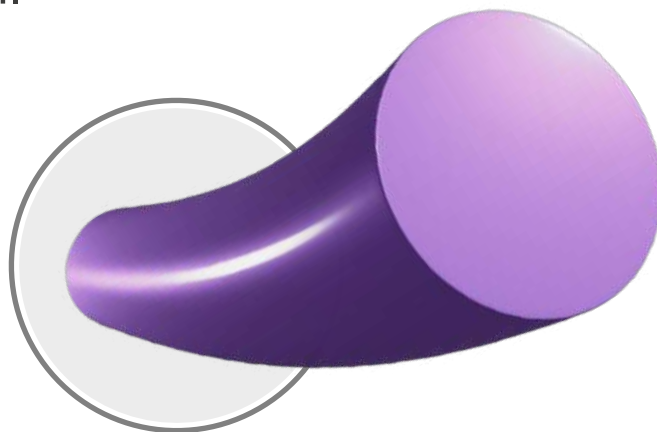

Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 180 a 220 días

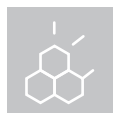

Composición
Poli (p-dioxanona) recubierto con Triclosán.



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona una excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

Otras Características



Medida USP
5/0 a 1 USP



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)

Procedimientos Recomendados


- ✓ Cirugía general
- ✓ Cirugía ortopédica
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía cardiovascular
perdiátrica



SUTUCRYL MONO

Poliglecaprone


Las suturas de poliglecaprone se fabrican a partir de un copolímero de poli (glicólico-co-ε caprolactona)(PGCL), que son biodegradables y bioabsorbibles. Esto significa que están hechas de una sola hebra de material y tienen una superficie lisa que reduce la irritación de los tejidos y el traumatismo durante su colocación y retirada. También tienen excelentes características de seguridad de nudos y manipulación, lo que facilita su uso en cirugía.

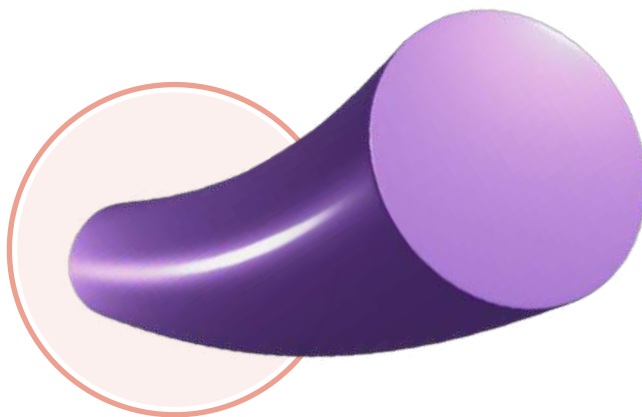

Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 90 días

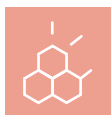


Composición
Copolímero de glicolida y
épsilon-caprolactona (PGCL)



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona
una excelente visibilidad en el
campo quirúrgico.

Otras Características

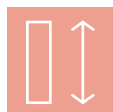

Medida USP
6/0 a 1 USP



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular


Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía general
- ✓ Procedimientos de tejidos blandos
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía urológica



SUTUCRYL MONO / Antibacterial Poliglecaprone


Las suturas de poliglecaprone se fabrican a partir de un copolímero de poli (glicólico-co-ε caprolactona) (PGCL) recubierto por Triclosán, que son biodegradables y bioabsorbibles. Esto significa que están hechas de una sola hebra de material y tienen una superficie lisa que reduce la irritación de los tejidos y el traumatismo durante su colocación y retirada. También tienen excelentes características de seguridad de nudos y manipulación, lo que facilita su uso en cirugía.

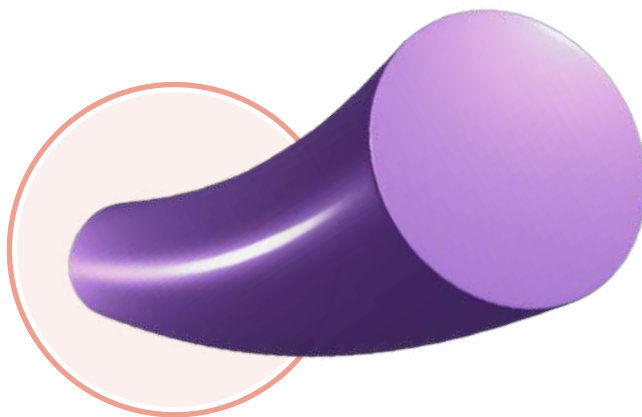

Información Técnica



Absorción
Por Hidrólisis, 90 días

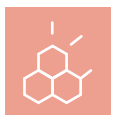


Composición
Copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona (PGCL), recubierto con Triclosán.



Color de hebra
Violeta o incoloro. Proporciona una excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

Otras Características

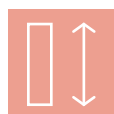

Medida USP
5/0 a 0 USP



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía general
- ✓ Procedimientos de tejidos blandos
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía urológica



CATGUT CRÓMICO

Las suturas de Chromic Gut están fabricadas con un material natural, lo que las hace biocompatibles y reduce el riesgo de reacción inflamatoria. Tienen una estructura monofilamento, por lo que es menos probable que causen daños en los tejidos durante su inserción o extracción.


Las suturas de Chromic Gut tienen un alto grado de flexibilidad y conformabilidad al tejido, lo que las hace adecuadas para su uso en zonas del cuerpo que sufren movimientos frecuentes, como la boca o el tubo digestivo. No se recomienda su uso en zonas de gran tensión o estrés, como los tendones o los ligamentos.



Información Técnica



Absorción
Por fagocitosis
60 a 90 días

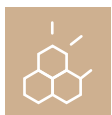


Composición
Componente primario el colágeno,
obtenido de la serosa de la
submucosa del intestino de bovinos.



Color de hebra
Marrón oscuro

Otras Características

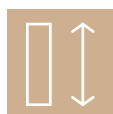

Medida USP
5/0 a 2 USP



Estructura
Multifilamento torcido



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados


- ✓ Cirugía general
- ✓ Ligaduras
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía gástrica



CATGUT SIMPLE

Las suturas Plain Gut están fabricadas con un material natural, lo que las hace biocompatibles y reduce el riesgo de reacción inflamatoria. Suelen utilizarse en intervenciones quirúrgicas en las que el organismo debe absorber el material de sutura en un breve periodo de tiempo.


Suelen utilizarse para la aproximación de tejidos blandos, como en el cierre de incisiones abdominales o para suturar membranas mucosas. Las suturas de tripa lisa son fáciles de manipular y atar, y tienen una excelente seguridad de nudo.

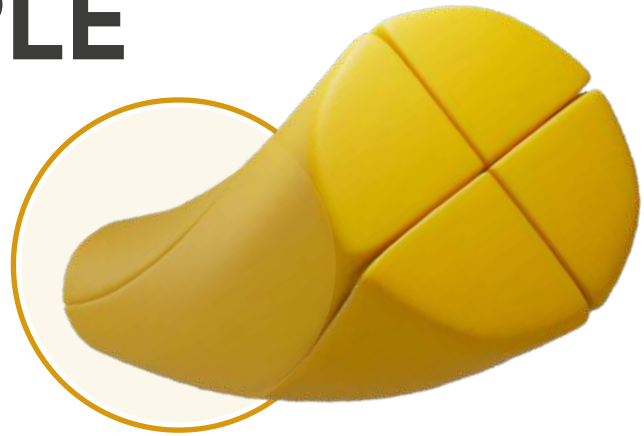

Información Técnica



Absorción
Por fagocitosis
70 días

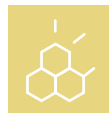

Composición
Colágeno de componente primario,
obtenido de la serosa de la
submucosa del intestino de bovinos.



Color de hebra
Beige o amarillo

Otras Características



Medida USP
5/0 a 0 USP



Estructura
Multifilamento torcido



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía general
- ✓ Ligaduras
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía gástrica



SUTUGEN

Gutflex


Las suturas de Chromic Gutflex están fabricadas con un material natural, recibe un tratamiento de pH neutro evitando la degradación en el sobre y aumentando su flexibilidad, la cual persiste aún después de varias horas de exposición al ambiente. Tienen una estructura monofilamento, por lo que es menos probable que causen daños en los tejidos durante su inserción o extracción. No se recomienda su uso en zonas de gran tensión o estrés, como los tendones o los ligamentos.



Información Técnica



Absorción
Por fagocitosis,
60 a 90 días

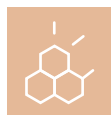


Composición
Colágeno de componente primario,
obtenido de la serosa de la
submucosa del intestino de bovinos.



Color de hebra
Marron oscuro

Otras Características

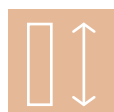

Medida USP
5/0 a 2 USP



Estructura
Multifilamento torcido



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía general
- ✓ Ligaduras
- ✓ Ginecología
- ✓ Cirugía gástrica





Suturas No Absorbibles


| Suturas No absorbibles

Producto	Medida USP	Punta de Aguja	Medida de Aguja	Medida de Hebra	Cantidad por Caja
SUTULON Nylon Monofilamento	10/0 a 3/0	Reverso cortante Redonda Cortante Precisión Espatulda	6 a 26 mm	30" / 75 cm	12
	3/0 a 2	Reverso cortante Redonda	36 a 48 mm		
	3/0 a 0	Recta	60 mm		
SUTUSILK Seda	6/0 a 0	Reverso cortante Redonda Cortante	12 a 26 mm	30" / 75 cm	
	3/0 a 4	Reverso cortante Redonda Cortante	30 a 48 mm		
	2/0	Recta	60 mm		
SUTULENE Polipropileno	7/0 a 2/0	Reverso cortante Redonda Cortante Precisión Cosmética	8 a 17 mm	30" / 75 cm	
	4/0 a 1	Reverso cortante Redonda Cortante	17 a 40 mm		
	3/0	Recta	60 mm		
SUTUBOND Poliéster	5/0 a 2/0	Redonda Cortante	12 a 26 mm	30" / 75 cm	
	4/0 a 5	Reverso Cortante Redonda Cortante	30 a 55 mm		

SUTULON

Nylon Monofilamento


Las suturas de nylon son suturas quirúrgicas sintéticas, monofilamento, fabricadas con polímero de Nylon. Son muy flexibles y se adaptan bien al tejido que se sutura, lo que las convierte en una buena elección para su uso en zonas donde hay movimiento o tensión. Las suturas de nylon están disponibles en varios tamaños y suelen teñirse para mejorar su visibilidad durante la intervención quirúrgica.

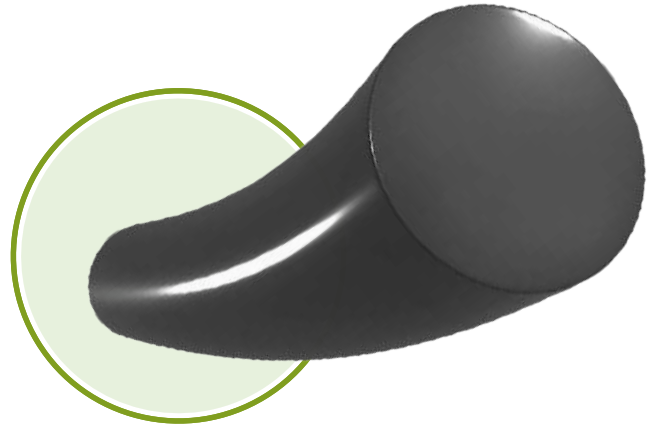

Información Técnica



Absorción
No absorbible

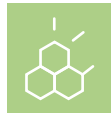

Composición
Polímero de Nylon



Color de hebra
Negro, azul.

Otras Características



Medida USP
10/0 a 0 USP



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía plástica
- ✓ Microcirugía
- ✓ Cirugía dental
- ✓ Cirugía oftálmica



SUTUSILK

Seda Negra Trenzada


Las suturas de seda se fabrican a partir de las fibras proteínicas del capullo del gusano de seda. No son absorbibles, lo que significa que no se descomponen ni se disuelven con el tiempo. Esto las hace ideales para su uso en situaciones en las que se necesita un soporte de la herida a largo plazo. En general, las suturas de seda tienen una excelente resistencia a la tracción y pueden soportar mucha tensión sin romperse.



| Información Técnica



Absorción
No absorbible

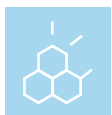

Composición
Fibras del capullo de
gusano de seda



Color de hebra
Negro, azul

| Otras Características



Medida USP
6/0 a 4 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

| Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía general
- ✓ Cirugía cardiovascular
- ✓ Cirugía neurológica
- ✓ Cirugía oftálmica



SUTUSILK

Seda Virgen


Sutura no absorbible de origen orgánico y estructura multifilamento, fabricada con hilos de seda virgen retorcidos. Se caracteriza por su facilidad de manipulación y gran seguridad en el anudado durante la implantación. Está indicada para procedimientos oftalmológicos, como el cierre de cataratas y conjuntival.



| Información Técnica



Absorción
No absorbible

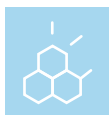

Composición
Fibras del capullo de gusano de seda



Color de hebra
Negro, azul

| Otras Características



Medida USP
6/0 a 4 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

| Procedimientos Recomendados


- ✓ Cirugía general
- ✓ Cirugía cardiovascular
- ✓ Cirugía neurológica
- ✓ Cirugía oftálmica



SUTULENE

Polipropileno

Las suturas de polipropileno están hechas de fibras sintéticas monofilamento derivadas del propileno, un polímero termoplástico. Son resistentes a la humedad, los productos químicos y las bacterias, lo que las convierte en una buena elección para su uso en heridas contaminadas o infectadas. Tienen una superficie lisa que reduce la fricción y el daño tisular durante la inserción y la extracción.

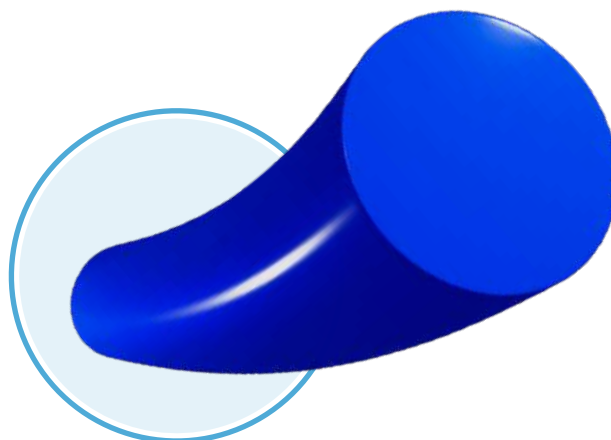

Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
Compuesto de propileno,
un polímero termoplástico.



Color de hebra
Negro, azul

Otras Características



Medida USP
7/0 a 1 USP



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía general
- ✓ Cirugía cardiovascular
- ✓ Reparación de hernia
- ✓ Cirugía ortopédica



SUTUBOND

Poliester

Las fibras de poliéster se fabrican como monofilamentos unidos mediante un proceso de trenzado. Están disponibles en blanco o teñidas de verde con un revestimiento de TEFLÓN o SILICONA para un paso suave a través de los tejidos y para facilitar la manipulación del producto.



Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
Fibras de polyester



Color de hebra
Verde, blanco, azul

Otras Características



Medida USP
5-0/5 a 2 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía cardiovascular
- ✓ Cirugía neurológica
- ✓ Cirugía ortopédica
- ✓ Aproximación de tejidos y ligaduras



SUTUFIBER

Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE)

Sutura sintética no absorbible de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), no absorbible multifilamento trenzada constituida por hebra o cinta de polimero termoplástico de cadenas extremadamente largas lo que da lugar a un material muy resistente. Los materiales de la sutura son compatibles con los tejidos del cuerpo impidiendo la aparición de reacciones de tipo alérgica ni inflamatoria, cumpliendo con las pruebas de citotoxicidad, hipoalergenidad, toxicidad sistémica, hemólisis, genotoxicidad e implantación.



Información Técnica

	Absorción No Absorbible		Composición Polietileno de ultra alto peso molecular		Color de hebra Verde, blanco, azul
---	-----------------------------------	---	--	---	--

Otras Características

	Medida USP 5-0/5 a 2 USP		Estructura Multifilamento		Esterilización OE (Óxido de Etileno) mínima reacción tisular
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía cardiovascular
- ✓ Cirugía ortopédica
- ✓ Cirugía neurológica
- ✓ Aproximación de tejidos y ligaduras



SUTUNEN

Lino retorcido

Es una sutura de lino retorcida, multifilamento, no absorbible, obtenida a partir de fibras largas de lino. No se reabsorbe, pero con el tiempo el tejido la encapsula.

Se puede utilizar en cualquier procedimiento que requiera soporte tisular no extendido y cuando la resistencia a la tracción no sea extrema.



Información Técnica



Absorción
No Absorbible




Composición
Fibras largas de lino



Color de hebra
Blanca

Otras Características

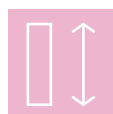

Medida USP
5-0/5 a 2 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía cardiovascular
- ✓ Cirugía neurológica
- ✓ Cirugía ortopédica
- ✓ Aproximación de tejidos y ligaduras



HILO DE MARCAPASO

Acero trenzado

El hilo de marcapasos está compuesto por filamentos quirúrgicos de acero inoxidable recubiertos de polímero de color naranja.

Esta sutura tiene una aguja curva y una aguja recta ensambladas en ambos extremos. La aguja recta está marcada con una ranura para facilitar el corte. No hay hilo expuesto en la zona ensamblada de la aguja recta. El extremo no aislado de la sutura está ensamblado con una aguja curva.



Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
Cable conductor: 49 a 19 hilos de acero inoxidable 316-L aislados con PTFE/PE biocompatible virgen. Aguja 302 y aguja KEITH.



Color de hebra
Azul, naranja

Otras Características



Medida USP
5-0/5 a 2 USP



Estructura
Multifilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados


- ✓ Marcapasos o monitorización cardíaca temporal



SUTUSTEEL

Acero

Se fabrica a partir de una aleación de acero quirúrgico. Es una sutura monofilamento, tiene una resistencia extraordinaria, es inerte, maleable y presenta un buen comportamiento de anudado. Se utiliza generalmente en procedimientos quirúrgicos de esternotomía.

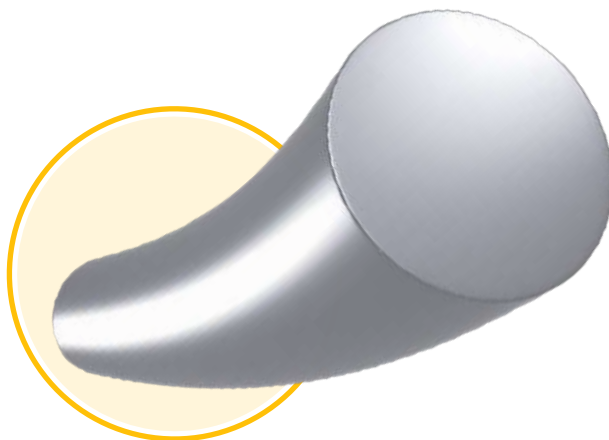

| Información Técnica



Absorción
No absorbible



Composición
Acero de alta calidad



Color de hebra
Plata metálica

| Otras Características



Medida USP
3 a 5 USP



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

| Procedimientos Recomendados

- ✓ Cirugía cardiovascular
- ✓ Procedimientos quirúrgicos de esternotomía




Mallas Quirúrgicas

MALLA QUIRÚRGICA

Malla de polipropileno No absorbible

La Malla Quirúrgica Sutumed está construida de monofilamentos de polipropileno con entrelazados de menor diámetro, lo cual permite estirla en ambas direcciones para poder acomodar y reforzar los defectos tisulares.

La alta resistencia de la malla le permitirá trabajar con seguridad y confiabilidad.

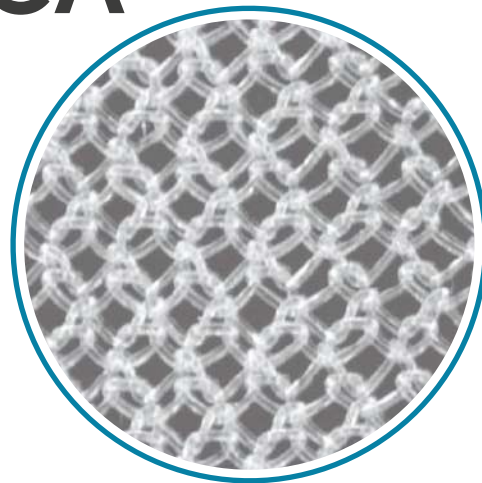

| Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
Polipropileno monofilamento



Color
Incoloro

| Otras Características



Medidas
3" x 6", 6" x 6", 12" x 12"
*Para otras medidas, contactar al representante de ventas



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

| Procedimientos Recomendados

- ✓ Reparación de hernia




MALLA QUIRÚRGICA Light Plus

Malla de polipropileno No absorbible

La Malla Quirúrgica Sutumed Light Plus es una malla monofilamento de polipropileno de baja densidad y poros mas amplios, lo cual permite estirla en ambas direcciones para poder acomodar y reforzar los defectos tisulares.

Está indicada para reforzar el tejido blando que estuviera debilitado, es decir reparar hernias y defectos de la pared del sistema torácico, así como prolapso vaginal, cistocele y rectocele

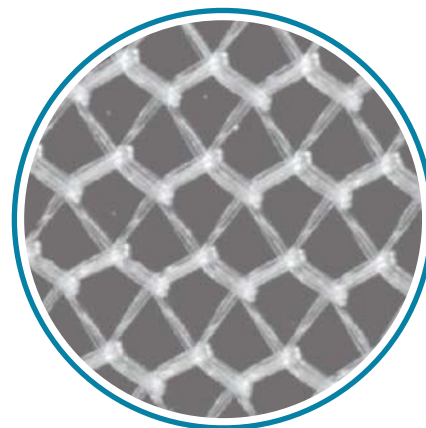

Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
Filamentos de polipropileno de baja densidad



Color
Incoloro

Otras Características



Medidas
6" x 6", 15" x 15"
*Para otras medidas, contactar al representante de ventas



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
minima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Reparación de hernia
- ✓ Urología
- ✓ Ginecología




MALLA QUIRÚRGICA Ultra

Polipropileno no absorbible con PGA + PCPL

Surgical Mesh Ultra está fabricada con polipropileno (material no absorbible) y PGA - ácido poliglicólico y PCL - Policaprolactona (material absorbible).

Con la absorción del ácido poliglicólico a través del proceso de hidrólisis que realiza el cuerpo, queda la malla de polipropileno cuya estructura está diseñada para soportar tensiones fisiológicas.

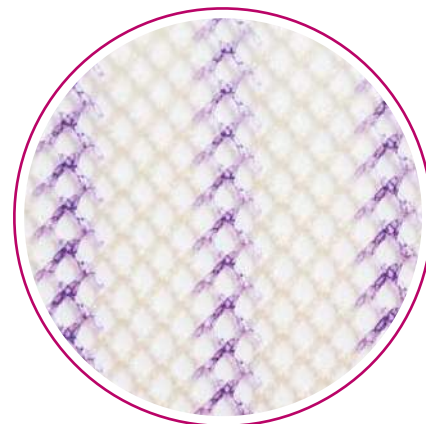

Información Técnica



Absorción
Parcialmente absorbible




Composición
Filamentos de polipropileno y
PGA-PCL



Color
Incoloro

Otras Características

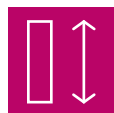

Medidas
6" x 6", 15" x 15"
*Para otras medidas, contactar al
representante de ventas



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
minima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Reparación de hernias
- ✓ Evisceración
- ✓ Cirugía abierta




MALLA QUIRÚRGICA Dual

Malla de contacto visceral

La Malla Quirúrgica Sutumed Dual es una malla estéril, no absorbible, no deformable, compuesta por una cara de 100% polipropileno, no tejido micro-perforado y otra cara de Silicona, ambas caras termofusionadas.

Presenta una gran resistencia a la adhesión a largo plazo y sin contracción.

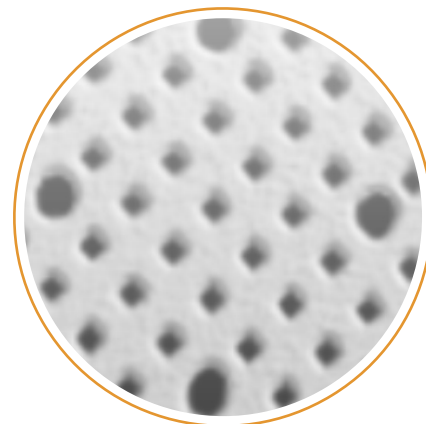

Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
2 caras termofusionadas. Una cara de polipropileno no tejido y una cara de silicona quirúrgica distribuida homogéneamente.



Color
Incoloro

Otras Características



Medidas
22 x 10 x 15 cm 30 x 20 x 30 cm
*Para otras medidas, contactar al representante de ventas



Estructura
Monofilamento



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Reparación de hernias
- ✓ Evisceración
- ✓ Cirugía abierta



Esponja Hemostática

ESPONJA HEMOSTÁTICA

Hemostático de colágeno absorbente

Producto fabricado de colágeno absorbente e implantable, de origen bovino, color blanco, estéril y atóxico, exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

De consistencia compacta, no se disgrega ante la inmersión de fluidos, con alta capacidad de absorción y adherencia a los tejidos. Convertido en lámina flexible responsable de su actividad hemostática y estructura uniforme porosa, absorbe un volumen de sangre de varias veces sus pesos.



Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
Colágeno absorbente e implantable de origen bovino.



Color
Incoloro

Otras Características



Medidas
10x10 cm, 10x12 cm, 8x12 cm
5x8 cm, 3x5 cm, 2x1 cm



Estructura
Filtro poroso y sin arañosos.




Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

*Para otras medidas, contactar al representante de ventas

Procedimientos Recomendados

- ✓ Hemorragia capilar
- ✓ Úlceras cutáneas

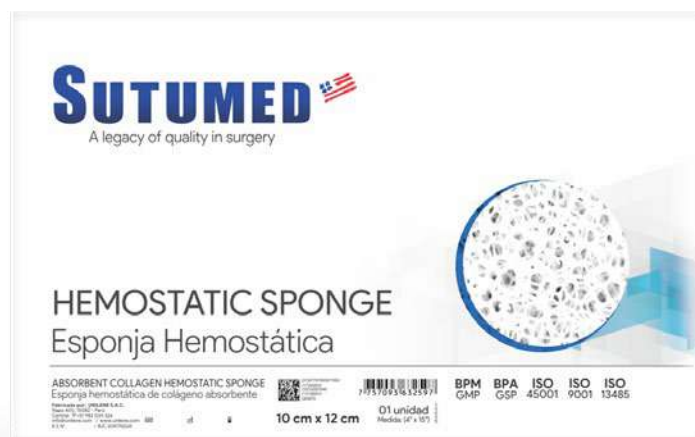



Cera para Huesos

CERA PARA HUESOS

Hemostático

Sutumed **Sterile Bone Wax** se utiliza como hemostático mecánico para controlar la pérdida de sangre en procedimientos quirúrgicos que afectan al tejido óseo, es un hemostático sin acción farmacológica. Su efecto es puramente mecánico al rellenar los espacios que quedan en el hueso tras el corte, conteniendo la hemorragia.



Información Técnica



Absorción
No Absorbible



Composición
83% de cera de abejas, 5% de parafina y 12% de palmitato de isopropilo.



Color
Crema o amarillo claro

Otras Características



Peso
2.5 gm



Esterilización
OE (Óxido de Etileno)
mínima reacción tisular

Procedimientos Recomendados

- ✓ Traumatología
- ✓ Cirugía maxilofacial
- ✓ Neurocirugía
- ✓ Cirugía cardiovascular



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



US-051001 (V03)

SUTUMED 
A legacy of quality in surgery.